



# 胃ろうの管理

様

## 本資料の位置づけについて

本資料は、胃ろう管理に際して、当院で実際に使用している物品等の一例をお示したものです。

掲載しているメーカー名・製品名・型番等は、当院での使用実績や互換性を確認しているものであり、特定の製品やメーカーを推奨・指定するものではありません。

診療上の判断や使用方法については、必ず主治医または医療スタッフの指示に従ってください。

なお本資料は、内容の見直し等により、予告なく変更される場合があります。

真生会富山病院  
栄養サポートチーム

2022年 2月作成  
2023年 6月改定  
2024年 10月改定  
2026年 1月改定


# 胃ろうの基本情報

胃ろうカテーテルの情報を  
貼り付けてください

次回の胃ろう交換日は  
主治医とご相談ください

※初回は内視鏡下で**4ヶ月後**、  
2回目以降は**半年後**が目安です。

カテーテル  
の種類は  
**バンパー  
ボタン型**  
です

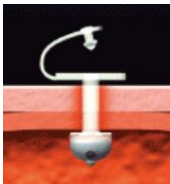


## 胃ろう栄養メニュー・スケジュール

栄養剤	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g×(                      )本
白湯	(                      ) ml	
食塩	(                      ) g   分 (                      )   朝・昼・夕	

	栄養剤	白湯	食塩
朝			
昼			
夕			

※ 栄養剤は一例です。同等の製品をご使用いただく場合があります。

# 準備物

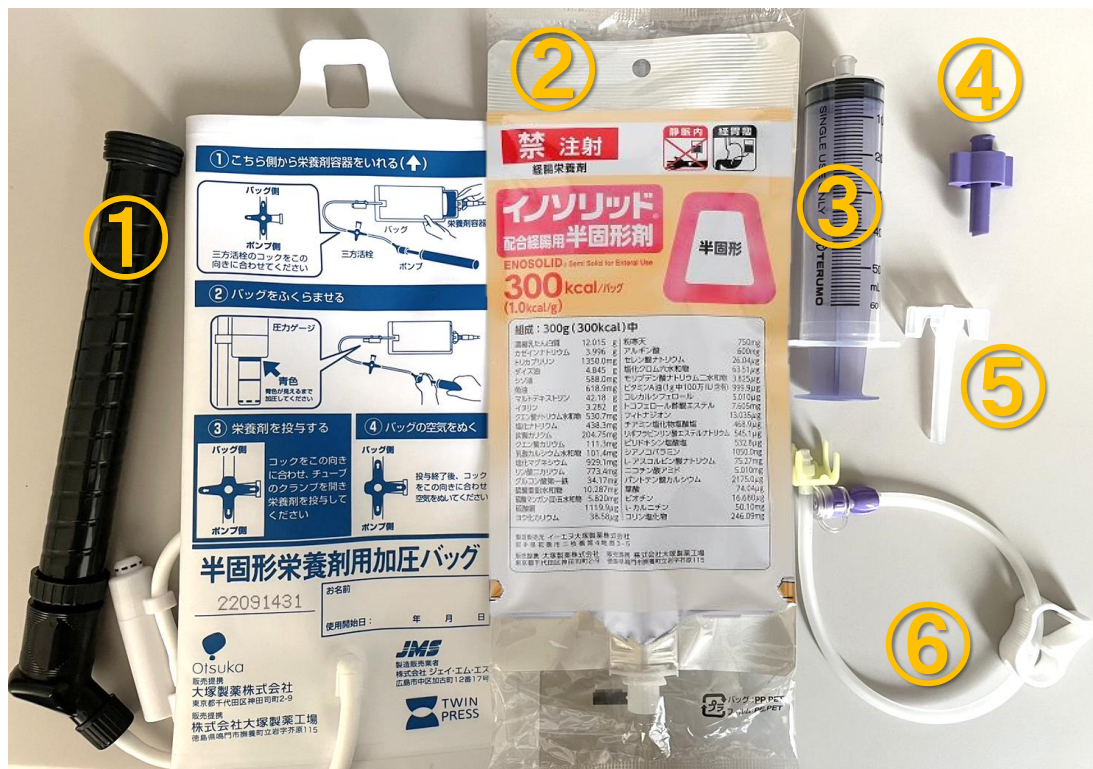

- ①加圧バッグ
- ②半固形剤（イノソリッド配合経腸用半固形剤）
- ③注射器（ENシリンジ50ml）
- ④専用アダプタ（経腸用半固形剤専用アダプタ）
- ⑤採液ノズル（薬を吸う時にシリンジに付ける）
- ⑥胃ろうチューブ（胃ろう用接続チューブ）

- \* 薬は60℃ほどの湯20mlで溶かす
- \* 白湯を投与する場合は、指定の量を準備しておく
- \* 食塩を投与する場合は、白湯に溶かす


- 胃ろうチューブに注射器を接続し、クレンメを開けてから、胃の中身を吸ってみます。  
赤色や黒色のものが引けたら訪問看護に連絡！
- 白湯を注射器で投与し、クレンメを閉じて注射器を外し、20～30分待ちます。

一連の流れを確認できる  
参考動画はこちら👉



※ 栄養剤、及び使用物品は一例です。同等の製品をご使用いただく場合があります。

# 半固形剤の注入

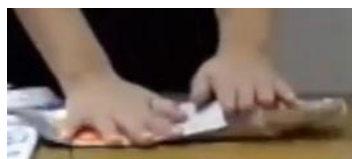

①半固形剤を  
10回程度よくもむ



②専用アダプタを  
半固形剤の口に差し込み  
右に回してねじ込む



③胃ろうチューブと  
専用アダプタを接続



④加圧バッグに  
半固形剤を入れる



⑤コックはこの向きで  
手動ポンプを押し引きして  
加圧バッグを膨らませる



⑥色のついたラインが見えてきたら  
コックをこの向きに合わせ  
圧力を維持させる



⑦クレンメを開き  
半固形剤が流れて  
いくのを確認  
流れが悪くになったら  
再度加圧する



⑧投与終了後  
コックをこの向きに合わせ  
加圧バッグの空気を抜き  
半固形剤を取り出す



⑨残った半固形剤は  
くるくる巻いて絞り出す

## 加圧バッグ使用上の注意点

加圧バッグの使用方法に  
関する参考動画はこちら



①**使用開始日**をご記入ください。

②**コックの向き**が正しくない場合、空気が抜け、投与に時間がかかるおそれがあります。


③汚れが付着した場合は、水又はぬるま湯を浸してしぼったガーゼ等で速やかにふきとり、乾いたら柔らかい布等で水気を拭き取って下さい。

**アルコール、消毒剤、液体洗剤、除菌シート**等は破損のおそれがあるため**使用不可**です。

④ポンプは**分解しない**でください。

※ 栄養剤、及び加圧バッグは一例です。同等の製品をご使用いただく場合があります。

## 薬の注入・終了後

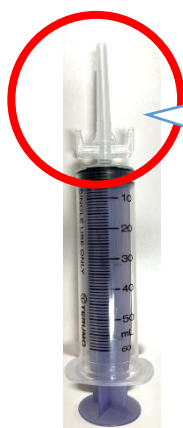

薬は採液ノズルをはめた注射器で吸い  
採液ノズルを外します  
次に注射器を胃ろうチューブに接続して  
薬を注入します

最後に水20mlを注射器で吸って注入し  
チューブの中を洗い流しましょう

## 日々のお手入れ

\* 1日1回は、胃ろうカテーテルをくるっと回しましょう。  
(回らない時は訪問看護に連絡！)

\* 注射器や専用アダプタ、胃ろうチューブなどの道具は、  
食器と同じと考えて、**台所用中性洗剤**で洗浄しましょう。

\* 胃ろうチューブの接続部が接続部が  
汚染されている場合は、  
**歯間ブラシ**などを用いて隙間を  
優しく磨き、流水でよく洗い流します。  
※L字型・Lサイズの歯間ブラシが便利です。  
※洗浄後は歯間ブラシの先端が折れていないか  
よく確認してください。



この溝に栄養剤や  
薬が残しやすい

\* 胃ろうチューブ内は、台所用洗剤を溶かした水を注射器で  
通した後、水を勢いよく注入して複数回洗い流してください。  
1日1回は、**次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）**に  
浸け置きすることをお勧めしますが、難しい場合は洗浄後、  
自然乾燥してください。(乾燥機に入れない)

\* 注射器の滑りが悪い時は、**食用油**を内側に塗ると、  
滑りが良くなります。

※ 商品名は一例です。同等の製品をご使用いただく場合があります。



# 胃ろう管理に必要な衛生材料

【ご利用にあたっての注意事項】 本ページに掲載している情報は、胃ろう（経腸栄養）管理に関する一般的な情報提供を目的としたものです。掲載されている製品情報は、**当院での使用例を示したものであり、特定の製品・メーカー・販売業者を推奨または指定する意図はありません。**製品の選択や購入にあたっては、患者さん・ご家族の状況や使用環境に応じて、主治医や医療スタッフとご相談のうえ、ご判断ください。

## ★病院から一定数お渡しするもの

ひと月あたりの個数

ENシリンジ50ml		全員の方	本
栄養セット		液体栄養剤を持続投与する場合 栄養ボトルを使用する場合	本
栄養ボトル		液体栄養剤や白湯をボトルに移して持続投与する場合 (投与には栄養セットが必要)	個
経腸用半固形剤専用アダプタ		半固形栄養剤を、加圧バッグやスクイザーを用いて投与する場合	個
採液ノズル		全員の方（内服吸引用）	個
加圧バッグ		半固形栄養剤を加圧バッグを用いて投与する場合	破損時は、病院にお問い合わせください。病院から提供後、 <b>3ヶ月以内</b> に破損された場合は、ご購入の上、後日病院にご返却ください。
スクイザー		半固形栄養剤をスクイザーを用いて投与する場合	破損時は、病院にお問い合わせください。（非売品です）

（お渡し方法） 訪問診療ご利用の方は、医師が訪問診療の際にお持ちします。  
外来受診の方は、医師が外来診察の際にお渡しします。



**「接続チューブ」は胃ろう交換の時のみの支給です。**

交換時に接続チューブを1本お渡しします。破棄されないようお気をつけください。

★当院売店（1階）で受注発注可能なもの（当院からお渡しする衛生材料以外に追加で購入されたい方）  
価格は当院売店にお問い合わせください。

胃ろうチューブ（胃ろう用接続チューブ）		ENFit エンドピブボタンII 持続投与セット 60cm 1箱5本入り ボストン M0059058		ジェイフィードEN採液ノズル 1箱25本入り JMS JF-3S02
		ENFit エンドピブボタンII ポーラス投与セット 30cm 1箱5本入り ボストン M0059059		大塚製薬 半固形栄養剤用 加圧バッグ 1個入り 大塚製薬 59161-0
		イディアルボタンZERO 24Fr用 60cm 1本入り オリンパス MD-49803P		テルフィードEDシリンジ 50ml 紫色 キャップなし 1箱20本入り テルモ ED-50A50
		MIC-KEYバルーンボタン用 30cm 1箱5本入り アバノスメディカルジャパン 0143-12		ジェイフィード栄養セットDEHPフリー QL 1箱20本入り JMS JF-3YSL35Q
		MIC-KEYバルーンボタン用 60cm 1箱5本入り アバノスメディカルジャパン 0143-24		ジェイフィード栄養ボトル 600ml 1箱5本入り JMS JF-FPV060

# 胃ろう管理に必要な物品をインターネットで購入する方法



【ご利用にあたっての注意事項】 本ページに掲載している情報は、胃ろう(経腸栄養)管理に関する一般的な情報提供を目的としたものです。掲載されている製品情報は、**当院での使用例を示したものであり、特定の製品・メーカー・販売者を推奨または指定する意図はありません**。製品の選択や購入にあたっては、患者さん・ご家族の状況や使用環境に応じて、主治医や医療スタッフとご相談のうえ、ご判断ください。なお、外部サイトへのリンク先の内容について、当院は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

リンク先は2026年1月現在の情報です。詳しくは、該当サイトをご確認ください。

テルフィードEDシリンジ 50ml  
紫色キャップなし  
1箱20本入り  
テルモ  
ED-50A50



ジェイフィード栄養セットDEHP  
フリーQL  
1箱20本入り  
JMS  
JF-3YSL35Q



ジェイフィード栄養ボトル  
600ml  
1箱5本入り  
JMS  
JF-FPV060



大塚製薬 経腸用半固形剤  
専用アダプタ  
ISO 80369-3 タイプ  
20個入り  
大塚製薬  
68502-9



ジェイフィードEN採液ノズル  
1箱25本入り  
JMS  
JF-3S02




大塚製薬 半固形栄養剤用  
加圧バッグ  
バッグのみ  
大塚製薬  
59161-0




PG加圧バッグQ用電動ポンプ  
・加圧バッグQ  
セット  
ニュートリー  
PE-PR40DP(電動ポンプ)  
PE-PR40DPB(加圧バッグ)



カンガルーボタンⅡ用投与  
セット(持続投与セット)  
60cm 1本入り  
カーディナルヘルス  
3733-50  
※ENFit エンドビブボタンⅡと  
同じ商品



カンガルーボタンⅡ用投与  
セット(ボラス投与セット)  
30cm 1本入り  
カーディナルヘルス  
3733-60  
※ENFit エンドビブボタンⅡと  
同じ商品



栄養用接続チューブ  
イディアルボタンZERO用  
24Fr用 60cm 1本入り  
オリンパス  
MD-49803P



MICボラスストレート  
接続チューブ  
MIC-KEYバルーンボタン用  
30cm 1本入り  
アバノスメディカルジャパン  
0143-12



MICボラスストレート  
接続チューブ  
MIC-KEYバルーンボタン用  
60cm 1本入り  
アバノスメディカルジャパン  
0143-24

